

# CARDIOVIT AT-102 G2

Einfach, smart und hochmodern



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT AT-102 G2

## Die neue EKG-Generation: CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Beste Signalqualität und diagnostische Algorithmen für Erwachsene und Kinder
- ⚡ Schnelle bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation mit KIS/EPA
- ⚡ Spirometrie und Basis-Belastungs-EKGs optional verfügbar



SpiroScout SP plus Spirometrieaufzeichnungen mit dem CARDIOVIT AT-102 G2

## MODERNSTE TECHNIK UND VERNETZUNG

Das CARDIOVIT AT-102 G2 bietet eine 8"-Farbanzeige mit Touch-Funktions-tasten. Die versiegelte alphanumerische Tastatur ist leicht zu reinigen und dadurch perfekt geeignet für die tägliche klinische Routine. Die intelligente Batterietechnologie ermöglicht die Aufzeichnung von EKGs über mehr als 8 Stunden.

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten ganz einfach von einem EPA-/KIS-System abgefragt und Berichte in den Formaten PDF, DICOM und HL7 rasch übertragen werden. Dank der Standard-Wi-Fi- und LAN-Konnektivität, der EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und dem grossen Speicher unterstützt das Gerät papierlose Arbeitsabläufe und hilft, Kosten zu sparen. Individualisierbare Ausschriebe sind auf dem integrierten, hochauflösenden A4-Thermodrucker möglich.

## HÖCHSTE EFFIZIENZ IN JEDEM ABLAUF

Noch nie war die EKG-Aufzeichnung einfacher und schneller: Geben Sie die Patientendaten ein oder laden Sie sie mittels PDQ oder Arbeitsliste herunter, zeichnen Sie das EKG auf und speichern, drucken und übertragen Sie die Daten innert 20 Sekunden und mit nur einer Taste.




## IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

- 1: Patientendaten eingeben oder herunterladen
- 2: Signalqualität prüfen und EKG aufzeichnen
- 3: EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

## DIAGNOSTISCHE TOOLS DES CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Ruhe-EKGs mit dem SCHILLER-Analyseprogramm ETM sowie ETM Sport für die automatische Interpretation von Sportlern.
- ⚡ Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnung während bis zu 10 Minuten.
- ⚡ Optimale Signalqualität für EKGs von Kindern.
- ⚡ Basis-Belastungs-EKG (optional) mit einer grossen Auswahl an Protokollen für Laufband und Ergometer.
- ⚡ Der CCAA-Algorithmus von SCHILLER (Culprit Coronary Artery Algorithm) lokalisiert den Verschluss in der Koronararterie und bestimmt somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.

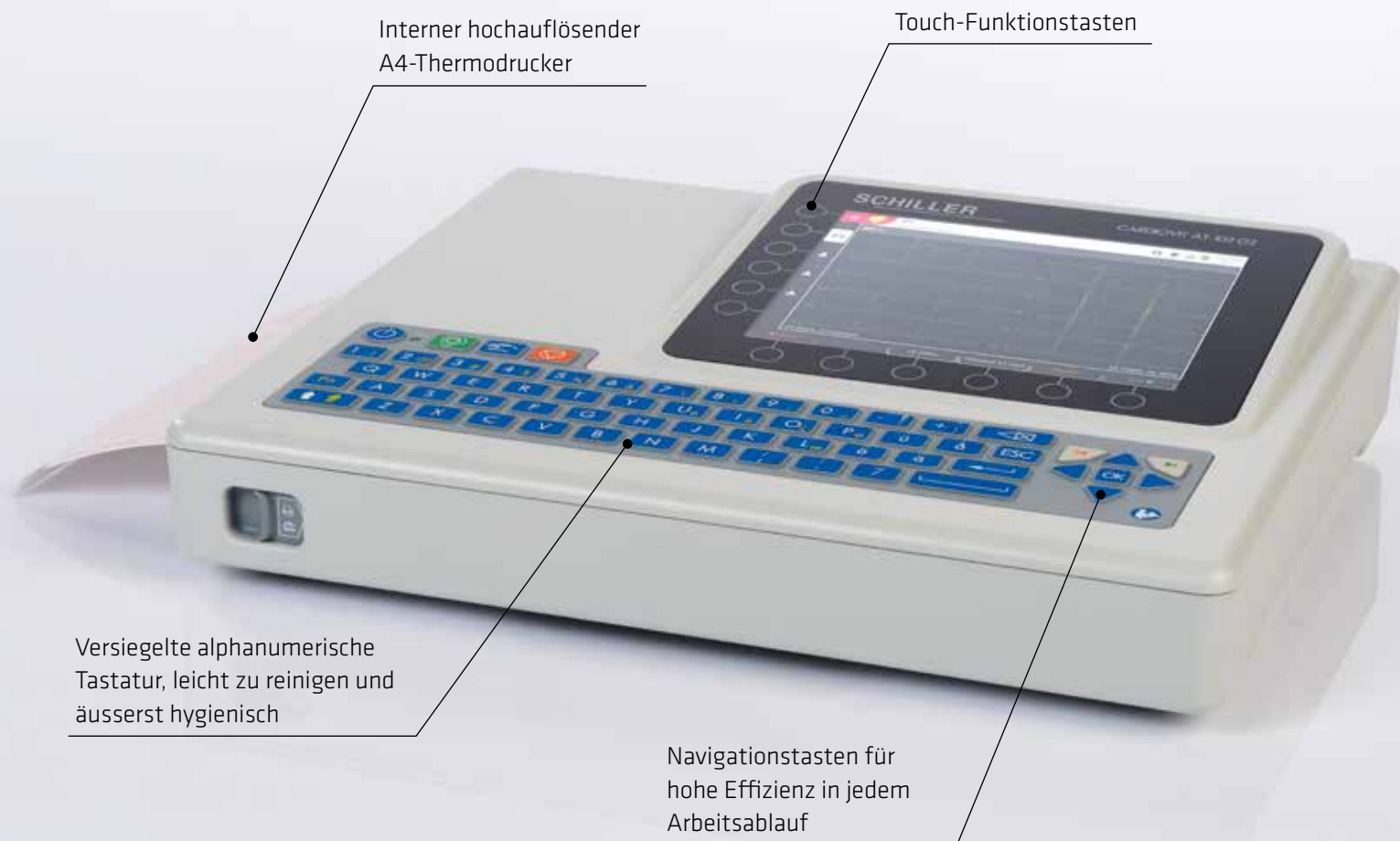

Das CARDIOVIT AT-102 G2 ist auch mit Gerätewagen verfügbar.

## SPIROMETRIE MIT DEM CARDIOVIT AT-102 G2

Mit dem SpiroScout SP plus wird das CARDIOVIT AT-102 G2 auch ein Spirometer. Dank der Ultraschall-Technologie von GANSHORN sind Spirometrie-Aufzeichnungen äusserst präzise. Zudem benötigt der Sensor weder Wartung noch Kalibrierung. Die Einweg-ScoutTubes garantieren maximale Hygiene und Patientensicherheit. ScoutTubes sind CO<sub>2</sub>-neutral.

Die Spirometrie-Option umfasst FVC, VC und MVV, eine grosse Auswahl an Referenz-Normen, Prä- und Post-Tests sowie die Interpretation von FVC-Ergebnissen.

Das Gerät zeigt die Qualität des Manövers während und nach jedem Test an.

Die umfangreichen Spirometrie-Ergebnisse können ausgedruckt und an ein EPA-/KIS-System übertragen werden.



Für Messungen mit Kindern ist eine Motivationsansicht verfügbar.



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Coatbridge, ML5 2DA  
Phone +44 1619 072 555  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

