


# CARDIOVIT CS-104

El ECG esfuerzo del futuro en un sistema integrado

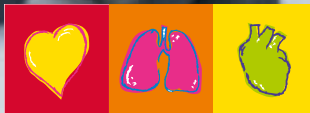


**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT CS-104

Todo lo que se necesita, en un único sistema:

- Adquisición de ECG por vía inalámbrica
- Espirometría por ultrasonidos opcional con SpiroScout SP plus
- Estación de trabajo integrada para el análisis de datos

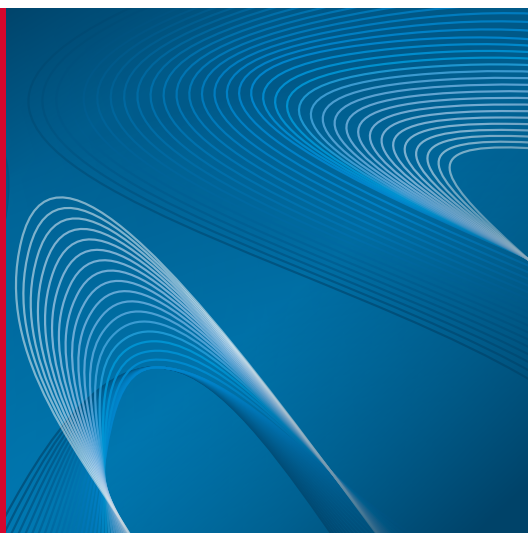

## TODAS LAS POSIBILIDADES EN UN ÚNICO SISTEMA

- ECG reposo con el programa de análisis de ECG de SCHILLER ETM así como ETM Sport, la interpretación automática para deportistas
- Registro del ritmo reposo de hasta 20 minutos con detección de arritmias opcional
- ECG Framer: ECG reposo de 10 segundos a partir de un registro de ritmo reposo
- ECG esfuerzo con detección de arritmias opcional
- ECG vector (opcional)
- Espirometría basada en la tecnología de ultrasonidos del SpiroScout SP plus (opcional)



## ESTACIÓN DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

El sistema CARDIOVIT CS-104 ofrece amplias funciones de análisis tanto de los datos adquiridos localmente como de los registros de todos los dispositivos SCHILLER conectados al servidor SCHILLER. Se ofrece conectividad bidireccional (con lista de trabajo y PDQ) a los sistemas EMR, HIS y PACS.

## ECG INALÁMBRICO

El módulo inalámbrico MS-12 blue simplifica enormemente la adquisición del ECG, ya que permite al usuario manejarlo libremente en cualquier

entorno y reduce al mínimo los artefactos de movimiento. Tanto si está acostado como corriendo en el tapiz rodante, el paciente tiene total libertad para moverse y apenas nota este pequeño y ligero dispositivo (115 g).

## CALIDAD SUIZA. LISTO PARA USAR


Con CARDIOVIT CS-104, SCHILLER ofrece un sistema de ECG completo, listo para usar en consultas, clínicas y hospitales.

La unidad está formada por un PC, un monitor, un carrito y un módulo de adquisición inalámbrico (MS-12 blue) o con cables (MS-12 USB). Como opción, el CARDIOVIT FT-1 se puede usar para la adquisición de ECG. Todo está preinstalado y probado por SCHILLER, listo para usar en la práctica clínica real.


CARDIOVIT CS-104 también está disponible como software para PC de ECG reposo y software para PC de espirometría.

Espirometro por ultrasonidos SpiroScout SP plus

Interfaz de usuario intuitiva y personalizable

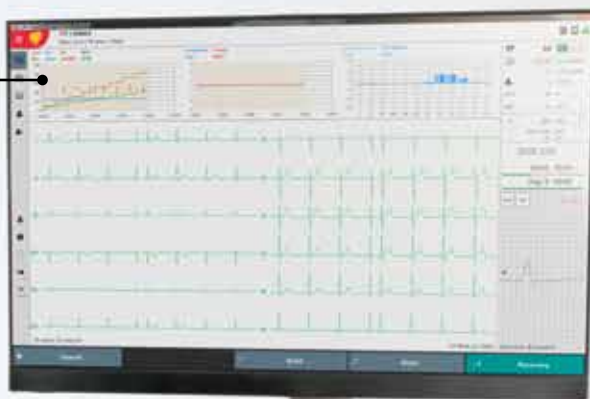

Cómoda asa de altura ajustable

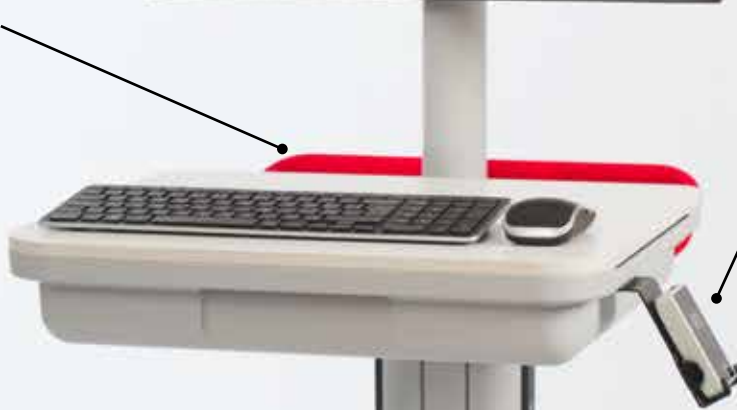

Pequeño pero potente módulo de adquisición de ECG inalámbrico con visualización de señal en pantalla y asesor de conexiones



Bandeja transparente para guardar y transportar artículos médicos

Ruedas de fácil deslizamiento para manejar el carrito cómodamente





**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 16 190 72 565  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

Article no.: 2.500797



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics