
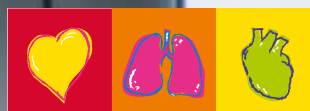


CARDIOVIT CS-104

Zintegrowany system do prób wysiłkowych

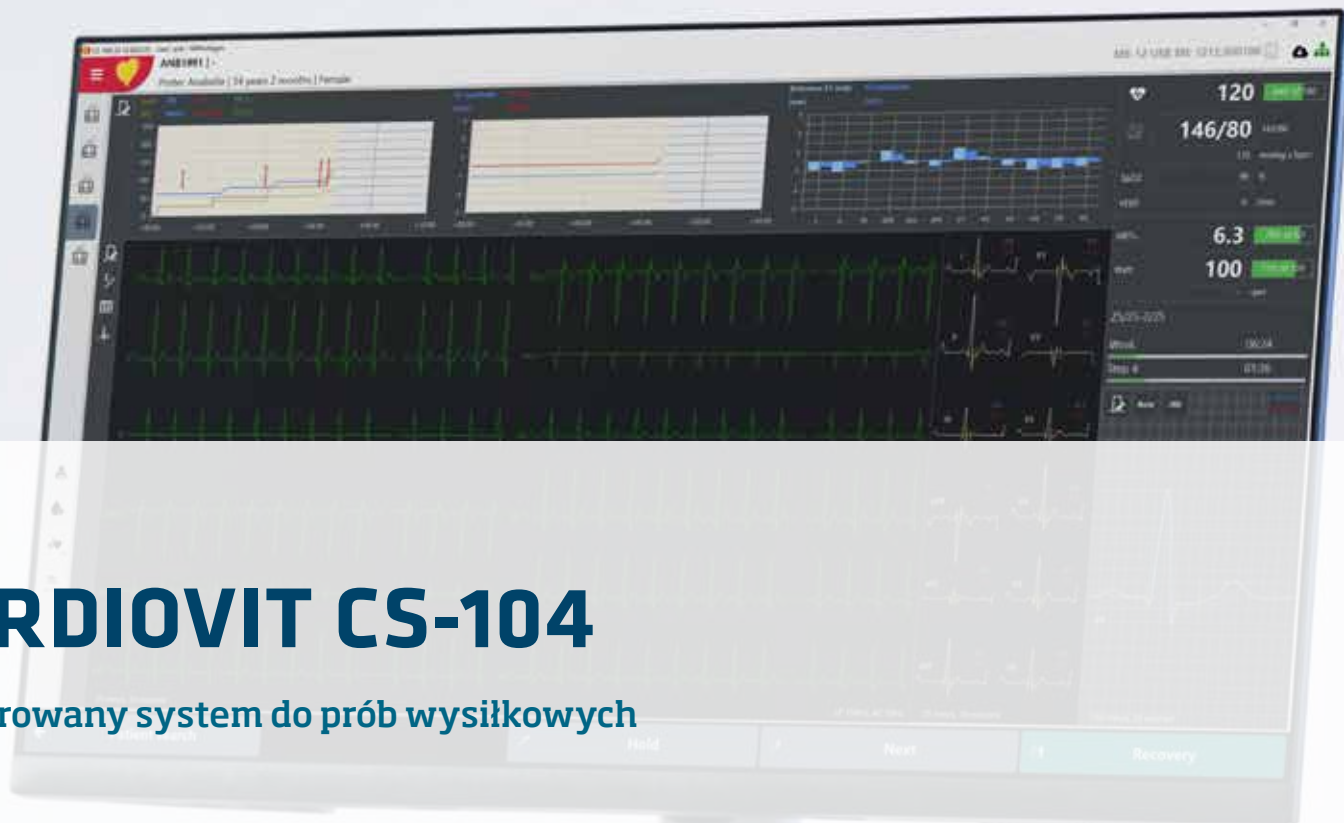


SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Wszystko, czego potrzebujesz
w jednym systemie:

- Bezprzewodowa rejestracja EKG
- Opcjonalna spirometria ultradźwiękowa ze SpiroScout SP plus
- Zintegrowana stacja robocza do przeglądania danych

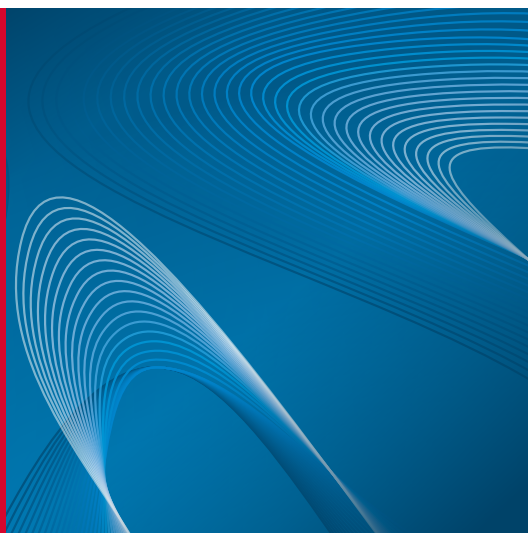

System wysiłkowy z zastosowaniem elektrokardiografu CARDIOVIT FT-1

WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI W JEDNYM SYSTEMIE

- Próba wysiłkowa z opcjonalnym wykrywaniem arytmii
- Próba z obciążeniem farmakologicznym
- EKG spoczynkowe z programem do analizy ETM firmy SCHILLER oraz modulem ETM Sport, umożliwiającym automatyczną interpretację wyników badań sportowców
- Rejestracja rytmu spoczynkowego do 60 minut z opcjonalnym wykrywaniem arytmii
- Ramka EKG: 10 sekund zapisu EKG z rytmu spoczynkowego

- EKG wektorowe (opcjonalnie)
- Spirometria bazująca na technologii ultradźwiękowej SpiroScout SP plus (opcjonalnie)

STANOWISKO ROBOCZE DO PRZEGLĄDANIA DANYCH

CARDIOVIT CS-104 zapewnia rozbudowane funkcje przeglądu i edycji parametrów, a także narzędzia do przygotowywania raportów końcowych. Można analizować zarówno dane pozyskiwane lokalnie, jak i nagrania z innych urządzeń do EKG spoczynkowego i systemów do prób wysiłkowych firmy SCHILLER połączonych z SCHILLER Server. Zapewniona komunikacja dwukierunkowa (w tym lista zadań i PDQ) z systemami EMR, HIS i PACS.

BEZPRZEWODOWE EKG

Opcjonalny bezprzewodowy moduł MS-12 BT znacznie upraszcza pozyskiwanie EKG, pozwalając użytkownikowi swobodnie działać w dowolnym środowisku i minimalizując artefakty ruchowe. Niezależnie od tego, czy pacjent leży, czy biega na bieżni, ma pełną swobodę ruchu i prawie nie zauważy tego małego i lekkiego urządzenia (115 g).

SZWAJCARSKA JAKOŚĆ – GOTOWE DO PRACY

System składa się z jednostki PC, monitora, podstawy jezdnej i bezprzewodowego (MS-12 BT) lub przewodowego (MS-12 USB) modułu akwizycji sygnału EKG. Opcjonalnie urządzenie CARDIOVIT FT-1 może służyć do rejestracji EKG. Wszystko zostało zainstalowane i przetestowane przez firmę SCHILLER i jest gotowe do użytku w gabinecie lekarskim.

Urządzenie CARDIOVIT CS-104 jest także dostępne jako oprogramowanie komputerowe do EKG spoczynkowego, z opcjonalnymi dodatkami do prób wysiłkowych i spirometrii.



Spirometr ultradźwiękowy
SpiroScout SP plus

Monitor BP-200 plus
(opcja) do automatycznego pomiaru ciśnienia i SpO₂ w czasie próby wysiłkowej

Wybór spośród trzech wersji modułów akwizycji danych:

- ❖ MS-12BT: niewielkich rozmiarów, ale o wielkich możliwościach bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG z zapisem sygnału na ekranie i trybem doradczym
- ❖ MS-12 USB: łatwy w użyciu, działający na zasadzie plug-and-play moduł akwizycji sygnału EKG
- ❖ CARDIOVIT FT-1: niezależny aparat EKG do badań spoczynkowych może być także zastosowany jako moduł akwizycji sygnału w zestawie CS-104

Lekko obracające się kółka umożliwiają sprawne manewrowanie wózkami

Intuitywny i konfigurowany interfejs użytkownika:

- ❖ Wybór różnych wersji prezentacji zapisu EKG
- ❖ Tworzenie własnych ekranów roboczych
- ❖ Definiowanie filtrów analizy danych i wyglądu wzorca raportu

Wysokość robocza regulowana w zakresie 88-122 cm z mechanizmem sprężynowym

Dołącz spirometrię do swojego zestawu próby wysiłkowej stosując spirometr SpiroScout SP plus (opcja)

Przezroczysty pojemnik do przechowywania i transportu artykułów medycznych





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch




Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.

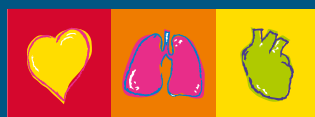

SCHILLER
The Art of Diagnostics