


ERG 910 PLUS ERG 911 PLUS

Silencioso, compacto, configurable

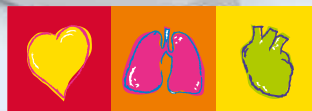

SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 910 PLUS

ERG 911 PLUS

Estos ergómetros complementan a la perfección a los sistemas de ECG esfuerzo y de ergoespirometría de SCHILLER:

- ❖ fácil de utilizar a través de la pantalla táctil
- ❖ características ergonómicas
- ❖ silencioso y cómodo
- ❖ compacto y estable



En el interior: masa giratoria óptima y transmisión por correa

Los ergómetros ERG 910 plus y ERG 911 plus se han desarrollado para su uso en el sector de cardiología. Son muy estables gracias a su estructura de tubos de acero. Son por ello adecuados para pacientes de hasta 160 kg de peso, o incluso para pacientes de hasta 200 kg si se incorpora el estabilizador (opcional). Las unidades son compactas y ocupan un espacio de suelo mínimo.

DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- ❖ Funcionamiento a distancia con un dispositivo maestro (ECG, PC, ...)
- ❖ Funcionamiento autónomo con un protocolo de pasos definible por el usuario o un control de carga manual

Masa giratoria óptima para una agradable sensación de pedaleo. Gracias a la transmisión por correa, las unidades no necesitan mantenimiento y funcionan silenciosamente.

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS

- ❖ Estructura baja para facilitar el acceso
- ❖ Posición de asiento ergonómico para pacientes de 1,40 m a 2,10 m, con sillín y pedales pediátricos (opcional) a partir de 1,20 m
- ❖ Manillas ajustable (360°)
- ❖ Ajuste eléctrico de la altura del sillín (opcional, solo para el ERG 911 plus)

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Todos los datos importantes de la prueba de esfuerzo (como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la velocidad de pedaleo, la información codificada por colores relativa al ritmo correcto de pedaleo) se muestran en pantalla. Medición de la presión arterial y el ajuste

eléctrico de la altura del sillín se controlan a través de la pantalla táctil. El panel de control puede girar 180°.

FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN

- ❖ Medición de SpO₂ con pinza de dedo o de oreja (opcional)
- ❖ Medición de la presión arterial con activador QRS (opcional)

CONECTIVIDAD

Los ergómetros se conectan al dispositivo principal a través de Bluetooth y RS-232.

ERG 910 PLUS

- ❖ Rango de carga 20-500 vatios, opcional 20-999 vatios

ERG 911 PLUS

- ❖ Rango de carga 20-999 vatios
- ❖ Altura del manillar ajustable
- ❖ Opcional: Altura del sillín eléctricamente ajustable





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 50
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics