

SpiroScout SP plus

per completare il vostro Elettrocardiografo con Spirometro ad ultrasuoni



SPIROSCOUT SP PLUS

Aggiungere la spirometria al vostro dispositivo ECG con SpiroScout SP plus è facile:

- ❖ Accurata tecnologia ad ultrasuoni GANSHORN
- ❖ Esente da calibrazione
- ❖ Nessun tempo di riscaldamento e senza parti separabili

SpiroScout SP plus contribuisce a rendere il vostro ambulatorio medico più efficiente aggiungendo le misurazioni di spirometria al vostro dispositivo ECG SCHILLER, usando la stessa piattaforma per due diversi esami. Usufruirete di tutti i vantaggi di un ECG e di uno spirometro completo, con dati integrati per una completa gestione delle informazioni cliniche.

SpiroScout SP plus incorpora un sensore di flusso ad ultrasuoni per misurare il flusso d'aria inspirata ed espirata del paziente. La tecnologia ad ultrasuoni elimina i problemi associati ai metodi

tradizionali della misurazione di flusso: non sono presenti parti separabili, non è necessario l'uso di filtro per la raccolta dell'espettorato del paziente e non necessita di calibrazione.

La misurazione del flusso ad ultrasuoni è indipendente dalla composizione, pressione e umidità e quindi non è influenzata da errori collegati a queste variabili. Lo ScoutTube monouso permette il passaggio degli impulsi ad ultrasuoni tra i trasduttori.

ScoutTube monouso non esegue alcuna funzione di misurazione e pertanto non richiede calibrazione.

MONOUSO E SOSTENIBILE

Per garantire che il prodotto sia sostenibile, SCHILLER compensa l'intera quantità di CO₂ emessa durante la produzione, l'imballaggio, la spedizione e lo smaltimento degli ScoutTube e dei filtri PFT.



01-20-162037
myclimate.org

I VANTAGGI ESCLUSIVI DELLA TECNOLOGIA AD ULTRASUONI GANSHORN:

Vantaggi della tecnologia ad ultrasuoni

- ❖ Sensore di misura non a contatto con il flusso del paziente
- ❖ Non influenzato da umidità, pressione barometrica e contaminazione
- ❖ Esente da calibrazione
- ❖ Nessuna pulizia dei sensori / filtri, senza manutenzione
- ❖ Prodotti di consumo semplici ed economici
- ❖ Estrema accuratezza per misurazione bassi flussi
- ❖ Subito pronto all'uso

Svantaggi della tecnologia tradizionale*

- ❖ Sensore di misura sempre a contatto con il flusso paziente
- ❖ Estremamente sensibile alla contaminazione (errori di misurazione)
- ❖ Richiesta una regolare calibrazione
- ❖ Richiesta la pulizia
- ❖ Criticità di rilevamento dei bassi flussi
- ❖ Necessaria manutenzione periodica

*turbina, pneumotacografo, filo riscaldato

SPIROSCOUT SP PLUS È COMPATIBILE CON:

- ❖ CARDIOVIT CS-104
- ❖ CARDIOVIT AT-102 G2
- ❖ SPIROVIT SP-1 G2




CARDIOVIT CS-104



CARDIOVIT AT-102 G2



SPIROVIT SP-1 G2

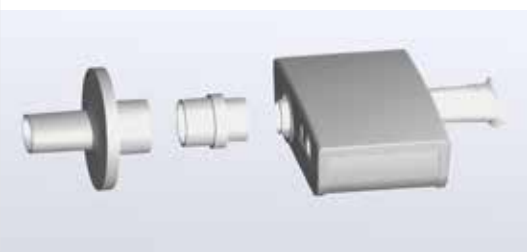

SCOUTTUBE

- ❖ Prodotto di consumo igienico per un solo paziente, per il pieno controllo della contaminazione
- ❖ Di forma ovale per un'aderenza ottimale alle labbra e alla posizione dei denti
- ❖ Conico per adattarsi a bocche di diverse grandezze

PFT FILTER

- ❖ Fornisce risultati accurati, senza perdite e riproducibili
- ❖ Protezione contro la contaminazione crociata nonché una protezione aggiuntiva per operatori e tecnici
- ❖ Adattatore disinfettabile



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

