

SEMA

Das Datenverwaltungssystem von SCHILLER:
Aufzeichnungen mit wenigen Klicks verwalten, auswerten und speichern




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

SCHILLER-Datenverwaltungssystem SEMA:

- ❖ mit SCHILLER-Geräten gewonnene Daten verwalten, auswerten und speichern
- ❖ Arbeitsabläufe zur Datenauswertung komplett individualisierbar
- ❖ für Arztpraxen und die komplexe Infrastruktur von Krankenhäusern geeignet

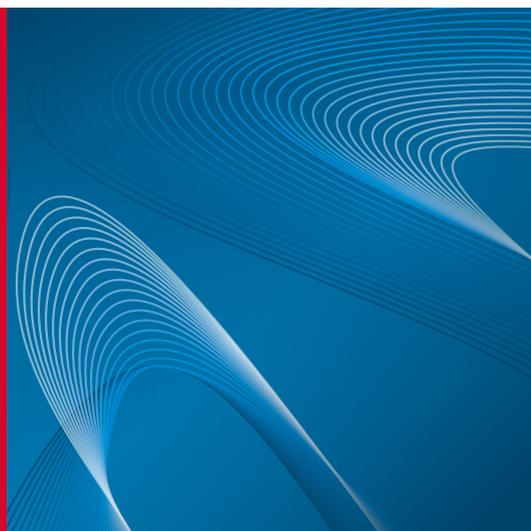

Mit SEMA Liberty Mobile holen Sie in kürzester Zeit eine zweite Meinung ein.

KLINISCHE EFFIZIENZ

Das SEMA-Datenverwaltungssystem ermöglicht dem Benutzer, die mit SCHILLER-Geräten gewonnenen Daten mit nur wenigen Klicks zu verwalten, auszuwerten und zu speichern.

SEMA überzeugt durch optimierte Tools wie Inbox (laufend aktualisierte Aufzeichnungsliste), Batch-Bearbeitung und benutzerdefinierte Suchkriterien und sorgt damit für schnellere Arbeitsabläufe.

EKG-ÜBERPRÜFUNG: IMMER UND ÜBERALL

Mit dem passwortgeschützten Webportal SEMA Liberty Mobile können Sie alle Aufzeichnungstypen bequem auf Ihrem Tablet oder Smartphone öffnen und überprüfen.

INDIVIDUALISIERBAR

- ❖ Bildschirmansichten und Arbeitsabläufe lassen sich an die Anforderungen der einzelnen Benutzer leicht anpassen.
- ❖ Interpretationsvorlagen, Akronyme und Berichte sind benutzerdefiniert.
- ❖ Jeder Benutzer kann die gewünschte Sprache auswählen.
- ❖ SEMA Office umfasst Lizenzen für bis zu 10 Arbeitsstationen; SEMA Enterprise bietet Lizenzen für eine unbegrenzte Anzahl an Arbeitsstationen.

VERNETZUNG VON SCHILLER

Zum SEMA System gehören SCHILLER Server und der auf einem lokalen PC installierte SEMA Client. Die Aufzeichnungen werden in der SCHILLER Server-Datenbank gespeichert und stehen auf dem SEMA Client zur Verfügung. Benutzer und Benutzerrechte werden auf SCHILLER Server definiert.

DATENSCHUTZ

Zuverlässiger Schutz der Patientendaten: Dank rollenbasierter Anmeldung und LDAP-Authentifizierung ist der Zugriff auf Patientendaten streng geregelt.

RUHE-EKG UND RUHE-RHYTHMUS

Ruhe-EKG- und Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnungen von SCHILLER-Geräten können in SEMA gemessen, ausgewertet und gespeichert werden. Mit ECG Framer lassen sich aus Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnungen 10-sekündige EKGs extrahieren, um diese auszuwerten und an Systeme von Drittanbietern zu senden.




BELASTUNGS-EKG UND CPET

Belastungsberichte können direkt auf dem Aufzeichnungsgerät oder auf einer SEMA Workstation abgeschlossen werden, auf der die Tests zur Auswertung und Berichterstellung im editierbaren Format vorliegen. CPET-Ergebnisse können ebenfalls in SEMA geöffnet und überprüft werden.



HOLTER-EKG UND ABDM

Die Berichte werden nach der Auswertung der Aufzeichnungen in der DARWIN2-Software direkt an SEMA gesendet, wo sie zusammen mit allen anderen Aufzeichnungen geöffnet und gespeichert werden können.

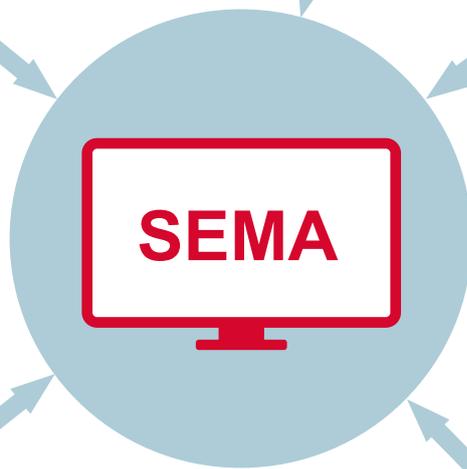

PNEUMOLOGIE

Die mit den Geräten von GANSHORN gewonnenen Lungentestergebnisse können an SEMA gesendet und dort zur Einsicht und Überprüfung gespeichert werden.



KIS/PACS/EPA

SEMA unterstützt die bidirektionale Kommunikation durch SCHILLER Server mit PACS, KIS und EPA-Systemen. Die ausgewerteten und gespeicherten Aufzeichnungen können für Systeme von Drittanbietern im DICOM-, HL7- und PDF-Format exportiert werden.



SPIROMETRIE

Die Ergebnisse von Lungenfunktions tests können an SEMA gesendet und dort zur Einsicht und Überprüfung gespeichert werden.



RETTUNG

Vom einfachen AED bis hin zum Multiparameter-Monitor können die Interventionsdaten aller SCHILLER-Notfall- und Rettungsprodukte in SEMA eingesehen werden.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 info@schiller.fr
 www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 sales@schiller-schweiz.ch
 www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 info@schiller.hr
 www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

