

SEMA

Das Datenverwaltungssystem von SCHILLER:
Aufzeichnungen mit wenigen Klicks verwalten, auswerten und speichern




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

SCHILLER-Datenverwaltungssystem SEMA:

- ✚ mit SCHILLER-Geräten gewonnene Daten verwalten, auswerten und speichern
- ✚ Arbeitsabläufe zur Datenauswertung komplett individualisierbar
- ✚ für Arztpraxen und die komplexe Infrastruktur von Krankenhäusern geeignet

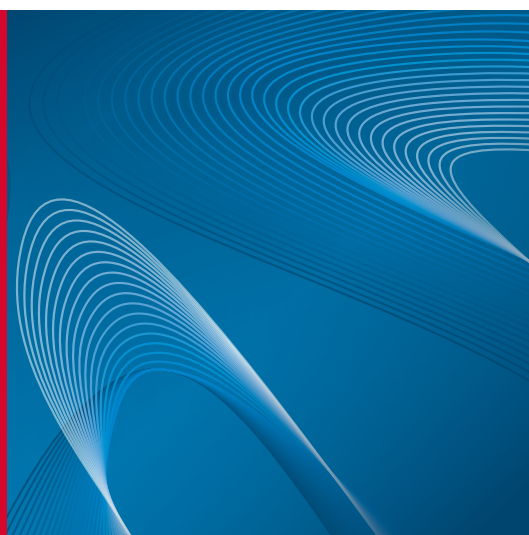

Mit SEMA Liberty Mobile holen Sie in kürzester Zeit eine zweite Meinung ein.

KLINISCHE EFFIZIENZ

Das SEMA-Datenverwaltungssystem ermöglicht dem Benutzer, die mit SCHILLER-Geräten gewonnenen Daten mit nur wenigen Klicks zu verwalten, auszuwerten und zu speichern.

SEMA überzeugt durch optimierte Tools wie Inbox (laufend aktualisierte Aufzeichnungsliste), Batch-Bearbeitung und benutzerdefinierte Suchkriterien und sorgt damit für schnellere Arbeitsabläufe.

EKG-ÜBERPRÜFUNG: IMMER UND ÜBERALL

Mit dem passwortgeschützten Webportal SEMA Liberty Mobile können Sie alle Aufzeichnungstypen bequem auf Ihrem Tablet oder Smartphone öffnen und überprüfen.

INDIVIDUALISIERBAR

- ✚ Bildschirmansichten und Arbeitsabläufe lassen sich an die Anforderungen der einzelnen Benutzer leicht anpassen.
- ✚ Interpretationsvorlagen, Akronyme und Berichte sind benutzerdefiniert.
- ✚ Die gewünschte Sprache kann für jeden Arbeitsplatz einzeln festgelegt werden.
- ✚ Jeder Benutzer kann seine eigene Startansicht und die eigenen Suchfilter speichern.
- ✚ SEMA Office umfasst Lizenzen für bis zu 20 Arbeitsstationen; SEMA Enterprise bietet Lizenzen für eine unbegrenzte Anzahl an Arbeitsstationen.

VERNETZUNG VON SCHILLER

Zum SEMA System gehören SCHILLER Server und der auf einem lokalen PC installierte SEMA Client. Die Aufzeichnungen werden in der SCHILLER Server-Datenbank gespeichert und stehen auf dem SEMA Client zur Verfügung. Benutzer und Benutzerrechte werden auf SCHILLER Server definiert.

DATENSCHUTZ

Zuverlässiger Schutz der Patientendaten: Dank rollenbasierter Anmeldung und LDAP-Authentifizierung ist der Zugriff auf Patientendaten streng geregelt.

RUHE-EKG UND RUHE-RHYTHMUS

Ruhe-EKG- und Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnungen von SCHILLER-Geräten können in SEMA gemessen, ausgewertet und gespeichert werden. Mit ECG Framer lassen sich aus Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnungen 10-sekündige EKGs extrahieren, um diese auszuwerten und an Systeme von Drittanbietern zu senden.



BELASTUNGS-EKG UND CPET

Belastungsberichte können direkt auf dem Aufzeichnungsgerät oder auf einer SEMA Workstation abgeschlossen werden, auf der die Tests zur Auswertung und Berichterstellung im editierbaren Format vorliegen. CPET-Ergebnisse können auch in SEMA/LFX geöffnet und bearbeitet werden.



HOLTER-EKG UND ABDM

Die Berichte werden nach der Auswertung der Aufzeichnungen in der DARWIN2-Software direkt an SEMA gesendet, wo sie zusammen mit allen anderen Aufzeichnungen geöffnet und gespeichert werden können.



PNEUMOLOGIE

Die mit den Geräten von GANSHORN gewonnenen Lungentestergebnisse können an SEMA gesendet und dort zur Einsicht und Überprüfung gespeichert werden.



SPIROMETRIE

Die Ergebnisse von Lungenfunktionstests können an SEMA gesendet und dort zur Einsicht und Überprüfung gespeichert werden.





KIS/PACS/EPA

SEMA unterstützt die bidirektionale Kommunikation durch SCHILLER Server mit PACS, KIS und EPA-Systemen. Die ausgewerteten und gespeicherten Aufzeichnungen können für Systeme von Drittanbietern im DICOM-, HL7- und PDF-Format exportiert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Berichte von Drittanbietern zu importieren.



RETTUNG

Vom einfachen AED bis hin zum Multiparameter-Monitor können die Interventionsdaten aller SCHILLER-Notfall- und Rettungsprodukte in SEMA eingesehen werden.

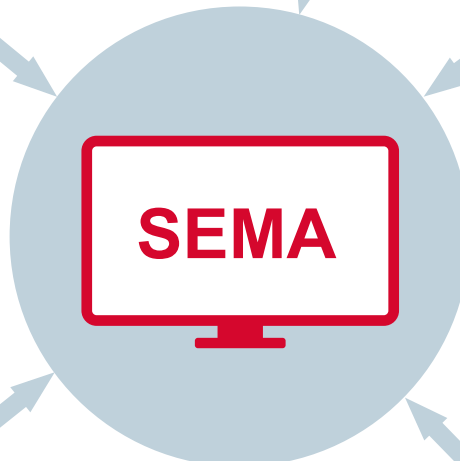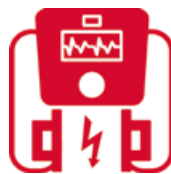



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

